

品名：キャビスパ360

カラー：ブラック

型番：HDS-100B

サイズ：約W52×D242×H50mm(本体)

製品質量：約280g

定格電源：DC9V 1.0A

消費電力：約6.5W

付属品：ACアダプター、置台

製造国：日本



品名：WAVY

カラー：ホワイト

型番：EP-15W

サイズ：約W90×D58×H177mm(本体)

製品質量：約230g

定格電源：DC5V 0.5A

消費電力：約2W

付属品：ACアダプター、充電台

製造国：日本



品名：EMSシェイプゲル

型番：YEM0001

内容量：200g

防腐剤、鉱物油、石油系界面活性剤、  
合成香料、合成着色料、シリコン、エタノール不使用



品名：キャビスパRFコアPLUS

カラー：ブラック

型番：HRF-51B

サイズ：約W83×D116×H97mm

製品質量：約307g

定格電源：DC9V 1.0A

消費電力：約5W

付属品：ACアダプター、充電台

製造国：日本

品名：キャビスパRFコアPLUS

カラー：ブラック

型番：HRF-51B

サイズ：約W83×D116×H97mm

製品質量：約307g

定格電源：DC9V 1.0A

消費電力：約5W

付属品：ACアダプター、充電台

製造国：日本

品名：EMSシェイプゲル

型番：YEM0001

内容量：200g



## 販売店



ヤーマン株式会社 〒135-0045 東京都江東区古石場1-4-4

商品に対する詳しいご説明・お問い合わせは下記URLまたはヤーマンセンターまで

【ヤーマンセンター】受付9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS 0570-550-637 (通話料有料)

[www.ya-man.com](http://www.ya-man.com)

●ご購入前に、商品パッケージで「安全に関するご注意」をご確認ください。

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●この商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2021年3月現在のものです。

PR-BODY-2021-1

ヤーマン公式サイト

日本語版

中文版



YAMAN  
TOKYO JAPAN

# BODY STYLE UP BOOK



魅せたいボディを作り出す

# Style up Yourself

お悩み部位にアプローチする

美容機器を使用することで、

リビングでも寝室でもバスタイムでも、

手軽にエステのような

ケアができます。

お悩みや気になる部位に合わせて

効果的な使い方をご紹介します。

**YAMAN**

ヤーマンは美容機器のリーディングカンパニー。

1978年の設立以来、エステサロンで選ばれる美容機器を作り続け、

その高度な技術を活かして自宅でできる本格エステを実現。

その高い品質は、日本で、世界で、広く愛されています。



## お悩み別おすすめ商品



NEW

温め&EMSで  
スピーディーにボディケア  
**キャビスパ RFコア PLUS**  
P.5-10

360°にアプローチ  
理想の全身ケア  
**キャビスパ 360**  
P.11-16



手軽にパーツを  
磨き上げ  
**WAVY**  
P.17-20

こんな方におすすめ

- お腹など広い範囲を一気にケアしたい



こんな方におすすめ

- 気になる箇所をピンポイントでケアしたい
- 『背中・お尻・太もも裏』届きにくい所もケアしたい

パーツ		
お腹	わき腹	二の腕
太もも	太もも裏	ふくらはぎ
ヒップ	フェイス	首

パーツ

お腹	わき腹	二の腕
太もも	太もも裏	ふくらはぎ
ヒップ	フェイス	首

機能



機能



その他

防水仕様 IPX7	充電式	100~240V 海外・国内兼用	MADE in JAPAN
-----------	-----	------------------	---------------

※1 エステ手技であり、人体への効果を示すものではありません



こんな方におすすめ

- 集中パーツケアしたい
- 筋肉の深くまでアプローチしたい
- 下半身やボディラインをケアしたい

パーツ

お腹	わき腹	背中
二の腕	太もも	太もも裏
ふくらはぎ	ヒップ	フェイス

機能



その他

防水仕様 IPX7	充電式	100~240V 海外・国内兼用	MADE in JAPAN
-----------	-----	------------------	---------------

## お悩み部位に集中アプローチ

### お手軽なのに本格ボディケア

ボディのお悩みはつきないもの。

トレーニングも良いですが、ちゃんとやろうと思うと続けるのが難しい...。

ご紹介する3商品は、たくさんのエステサロンでも取り上げられている本格ケアを自宅で気軽に味わうことができる美容機器です。

エステサロンではそれぞれ別で行うキャビテーションやRF(ラジオ波)、EMSといった機能で同時にケアできる商品や、業務用でも採用される周波数を出力する商品もあり使いやすく時短になるすぐれもの。

いつものライフスタイルにボディケア習慣を取り入れられる、BODY STYLE UP BOOKを是非お楽しみください。

#### キャビテーション

超音波により、お肌を振動させるケアです。運動だけではアプローチしづらいパーツや、ハンドケアでは痛くてもみ出せないパーツのケアにオススメです。

#### RF(ラジオ波)

高周波をお肌にあてることで肌を深部<sup>※1</sup>から温め、ボディケアに最適な状態にするケアです。体が冷えやすい方におすすめです。

#### EMS

外部から電気刺激を与えて筋肉を刺激するケアです。普段使われない筋肉を刺激できるので、負荷がかかる運動することなくボディケアが叶います。



ダイエット  
アドバイザー

## 原志保

### PROFILE



1969年生まれ。2児の母。モデルとして活躍する傍ら、ダイエットアドバイザー、フィットネスインストラクター、エステティシャンとして、お肌と身体のトータルビューティスタイルを提案している。

広範囲を温めながら  
エステのようなボディケア。  
スピードインに、



キャビスパ  
RFコア PLUS  
製品型番: HRF-51B  
温め&引き上げ<sup>※1</sup>

エステサロンで人気のキャビテーション、RF(ラジオ波)、EMSの3つの機能を1つの機器に搭載し、同時出力を可能にしました。ヤーマン独自の二重リング電極で効率的にお肌を温めながら、電極についた突起でお肌を押し流すことで効率的なケアを実現。


お肌を温めケアに最適な状態へ  
RF(ラジオ波)

超音波振動でお肌をケア  
キャビテーション

素早いケアを可能にする  
広範囲な出力面積

筋肉を深く、強く動かす  
複合高周波EMS


<sup>※1</sup> 機器を上に動かすこと <sup>※2</sup> HRF-17Pとの比較 <sup>※3</sup> 角質層まで

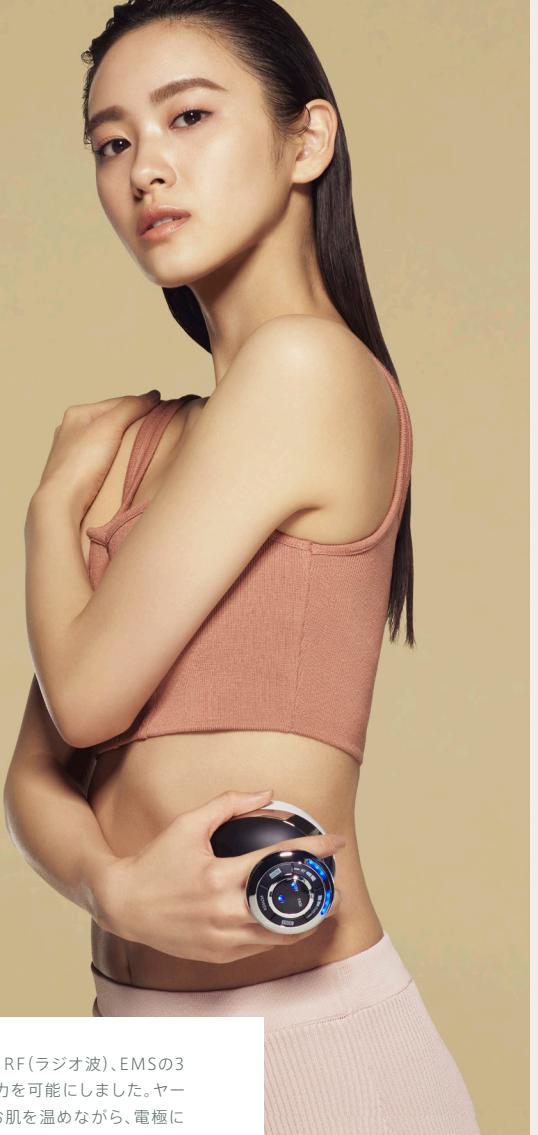

## Point!

1 お肌を温め、  
ケアに最適な状態へ  
RF(ラジオ波)

ヤーマンのRF(ラジオ波)は独自技術「RFリフトテクノロジー」を搭載。二重のリングでお肌を深く<sup>※3</sup>長く広く温めます。使用部位がじんわり温まり、心地よく感じるレベルでお使いください。

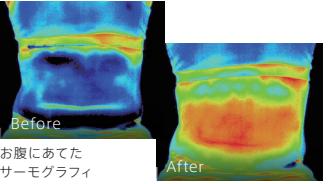

[使用機種] HRF-17P

## 2 超音波振動でお肌をケア キャビテーション


業務用キャビテーション機器にも採用される  
330kHzの周波数でお肌をケアします。



ラードでの実験

## 3 2種のEMSを組み合わせ、 効率的に筋肉を刺激 複合高周波EMS

筋肉を強く動かす低周波EMSと、筋肉の深くまで行き届く高周波EMSを組み合わせた「複合高周波EMS」で、より深い筋肉まで強く動かすことが可能です。

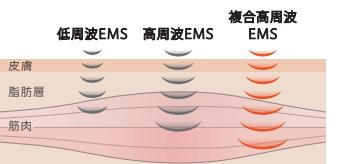

イメージ

## 選べる2つのモード

### ● ボディモード

広い出力面でパワフルに電気刺激を与え、効率的にケア。

### ● フェイスモード

温めながら表情筋のケアをしお肌をケア。



<sup>※4</sup> 使用上の注意 <sup>※5</sup> 1秒間に2~5cmを目安にゆっくりと動かしましょう。●初めての使用では慣れるまで、必ずレベル1からご使用ください。また、EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げないようご注意ください。●髪の毛を巻き込まないように束ねるかヘアバンドなどで固定してください。●アクセサリー類は外してください。●化粧をおとした清潔な状態のお肌にご使用ください。

# キャビスパ RFコア PLUSの効果的な使い方

キャビスパ RFコア PLUSをより体感していただくには、ONの日とOFFの日を上手に使い分けることをオススメしています。

◆ ONの日 … 過に2~3回、キャビスパ RFコア PLUSでケアしましょう。

◆ OFFの日 … キャビスパ RFコア PLUSを使用しない日も、ハンドケアやストレッチすることで身体がほぐれ、血行を促進し、より効果を体感しやすくなります。ここではそれぞれの部位に特化したOFFの日のケアをご紹介します。

## ハンドケア

身体の凝りやむくみ、冷え性の原因のひとつに“血行不良”があると言われています。ハンドケアで筋肉の緊張をゆるませ、リンパの流れを良くすることで、めぐりの良い身体作りを目指します。

## ストレッチ

筋肉が硬いと血行が悪くなり、不要な老廃物が蓄積して基礎代謝を低下させてしまいます。ストレッチで身体をほぐし、血行促進を目指します。

ボディモード … 使用したい部位にゲルなどを塗るか、水で濡らしてからご使用ください。



## お腹 Waist

### ◆ ONの日のケア方法

全体をしっかりとみ出すように。お腹の外側から内側に向かってジグザグに動かしてください。おへその周りに円を描くように動かしたあと、わき腹から足の付け根に向かって流すようなイメージで動かします。



### ◆ OFFの日のケア方法

1日空けてからハンドケアをします。親指以外の4本の指で足の付け根にUの字を描くように5回さります。




## お尻 Hip

### ◆ ONの日のケア方法

理想のラインを意識して押し流す。

ヒップの内側から外側に向かって上下にジグザグに動かしてください。その後内側から外側に向かって押し流すように横にスライドさせます。

※素肌に直接あててください。

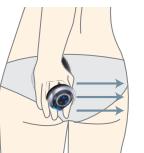

### ◆ OFFの日のケア方法

足をクロスさせ、後ろになった側のヒップを持ち上げます。両手を交互に使って30回さすり上げたら、逆側も同様に。



## 内もも Thigh

### ◆ ONの日のケア方法

付け根に向かってしっかりと押し上げる。

付け根から足の付け根にかけて機器を押してながら動かします。



### ◆ OFFの日のケア方法


足裏を合わせて座り、足先をもって前屈します。骨盤を立てたまま深く上体を倒し10秒キープ。10回繰り返しましょう。

裏もも  
Thigh

## ◆ ON日のケア方法

頑固な部位をじっくり  
もみ出す。

ひざ裏にしっかりと機器をあて、足の付け根に向かって押し流します。

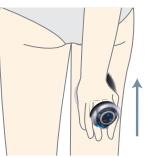ふくらはぎ  
Calf

## ◆ ON日のケア方法


お肌を引き締めるように  
押し流す。

かかとからひざ裏にむけて機器を押しあてながら  
滑らせます。



## ◆ OFF日のケア方法



あお向けになり右足のふくらはぎを左ひざにのせ、アキレス腱側からひざ裏側まで、全体をまんべんなくほぐします。EMSシェイプゲルを左ひざにのせると滑りが良くなります。約10往復。逆側も同様に。

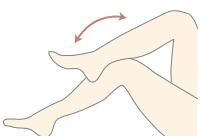二の腕  
Arms

## ◆ ON日のケア方法

わきに向かってしっかりと押し流す。

手の平を上に向けて腕を伸ばした状態で、ひじからわきに向かって流すようにケアします。

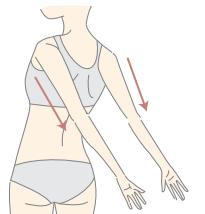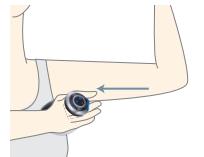

## ◆ OFF日のケア方法

腕を後ろにまっすぐ伸ばし、手のひらを天井に近づけるように力を入れます。そのまま3呼吸キープし、わきの下のリンパ節を刺激してめぐりを促します。

## フェイスモード…顔にはフェイスモードのみご使用ください。

髪の毛を巻き込まないように束ねるかヘアバンドなどで固定してください。  
アクセサリー類は外し、化粧をおとした清潔な状態のお肌にご使用ください。

首  
Neck

鎖骨に向かってじっくり押し流す。

首からデコルテに向け押し流すようなイメージで  
動かしましょう。

フェイス  
ライン  
Face

優しく滑らせ引き上げるイメージで。

あごから耳に向かって、フェイスラインに沿って  
滑させていきます。



背中もお尻も！

全方位、抜かりのない  
美しいボディへ。



キャビスパ 360  
製品型番:HDS-100B

360°スライド  
ドレナージュ<sup>※1</sup>



従来難しいとされていた湾曲型の3Dキャビテーション&EMS電極を開発。人間工学に基づいたスティック型の本体(特許申請中)での、キャビテーションとEMSの同時出力が可能になりました。さらに、本体をお肌の上から押し流すスライドドレナージュ<sup>※1</sup>によって筋膜にアプローチすることで、より本格的なボディケアが可能に。

お肌の上を滑らせ筋膜にアプローチ  
スライドドレナージュ<sup>※1</sup>

超音波振動でお肌をケア  
キャビテーション

届きにくい部位までフィット  
スティック型デザイン

筋肉を深く、強く動かす  
複合高周波EMS

※1 エステ手技であり、人体への効果を示すものではありません

## 1

### お肌を押し流し、 筋肉へより近くアプローチ スライドドレナージュ<sup>※1</sup>


お肌を押し流すエステティシャンの手技を再現したスライドドレナージュ<sup>※1</sup>によって、お肌にあてるだけで筋膜への効率的なアプローチを実現しました。



## 3

### 2種のEMSを組み合わせ、 効率的に筋肉を刺激 複合高周波EMS

筋肉を強く動かす低周波EMSと、筋肉の深くまで行き届く高周波EMSを組み合わせた「複合高周波EMS」で、より深い筋肉まで強く動かすことが可能です。

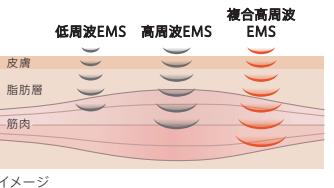

### 選べる3つのモード

#### ● エクサモード

トントンという刺激で筋肉へアプローチ。

#### ● セルケアモード

もみ出すようなギューという刺激で筋肉へアプローチし、和らげる。

#### ● フェイスモード

フェイス専用のEMS波形が、複雑な表情筋をきめ細かく刺激。



## Point!


あらゆる角度から  
アプローチ！  
スキのない  
美ボディに近づく！



## 2

### 超音波振動でお肌をケア キャビテーション

業務用キャビテーションマシンにも使われる、330kHzの本格キャビテーションを搭載。360°体の気になる部分にパワフルにアプローチします。

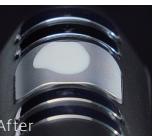

ラードでの実験

### USER'S VOICE

◆ 産後のヒドい体型を少しでも早くマシにしたくて購入。お風呂で使えて便利！お顔にも使えるなんて！背中も一人でラクラクケアできます。

◆ お腹と二の腕のぶにぶを中心に使っています。家で手軽にエステがでて楽しい！

◆ 充電式なのでお風呂で半身浴しながら使っています。愛用中です！

○ 使用上の注意 ○ ● 使用頻度:週2~3回、1部位10分程度 ● 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。● EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げないようご注意ください。● 頬にはFACEモードのみご使用ください。● 化粧を落とした清潔な状態のお肌にご使用ください。

# キャビスパ 360の効果的な使い方

キャビスパ 360をより体感していただくには、ONの日とOFFの日を上手に使い分けることをオススメしています。

## ◆ ONの日 … 週に2~3回、キャビスパ 360でしっかりケアしましょう。

### セルケアモード

もみ出るようなギューという刺激で筋肉ヘアaproチし、和らげる。気になる部位を集中的にケアしたい方へ。



### エクサモード

トントンという刺激で筋肉ヘアaproチ。筋肉を鍛えてメリハリのあるシルエットを目指したい方へ。



## ◆ OFFの日 … キャビスパ 360を使用しない日も、ハンドケアやストレッチをすることで身体がほぐれ、血行を促進し、より効果を体感しやすくなります。 ここではそれぞれの部位に特化したOFF日のケアをご紹介します。

### ボディモード … 使用したい部位にゲルなどを塗るか、水で濡らしてからご使用ください。

基本的な使い方は動画でチェック!



## お腹 Waist

### ◆ ONの日のケア方法

#### セルケアモード

お腹の外側から内側に向かってジグザグに動かします。



#### エクサモード

1日空けてからエクサモードでケアします。おへその上側、下側それぞれの筋肉が動くのを感じるように、キャビスパ 360をあてます。



### ◆ OFFの日のケア方法

1日空けてからハンドケアをします。親指以外の4本の指で足の付け根にUの字を描くように5回ささります。



## わき腹 Flank

### ◆ ONの日のケア方法

#### セルケアモード

片手をキャビスパ 360に添えながら、ウエストの一番細い部分から骨盤に向かって滑らせるように動かします。


#### エクサモード

左右をコルセットのように引き締める筋肉「腹斜筋」を意識しながら、キャビスパ 360を腹部の左右にあてます。



### ◆ OFFの日のケア方法

腰の中央に両手を置き、前に向かって手を移動させます。わき腹を通って、おへその方まで持ってきてます。気になる部位を寄せるようなイメージで5回繰り返します。

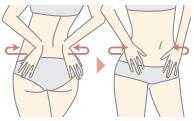

## 背中 Back

### ◆ ONの日のケア方法

#### セルケアモード

反対側のウエストに手を回すようにヘッドを背中にあて、わきの下に向かって押し流します。



#### エクサモード


肩甲骨の周りの気になる部位を押しのけるようにヘッドを押しあてて、筋肉を動かします。

※素肌に直接あててください。



### ◆ OFFの日のケア方法

お腹に力を入れながら両手を上に持ち上げ、手のひらを内側にして合わせます。肩甲骨をしっかりと内側に寄せながら、わきをしめるよう両手を腕の前までおろし、ゆっくり手を上に戻します。これを20回繰り返します。

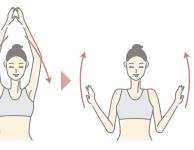

## おしり

Hip



## ◆ ONの日のケア方法

## セルケアモード

骨盤にそって腰骨から足の付け根に向かって押しづります。



## エクサモード

1. キャビスパ360を下から上に持ち上げるように押しあてて、足とヒップの境い目の筋肉を刺激します。



2. ヒップ上部にヘッドをあてます。筋肉がよく動くポイントを探して、左右それぞれ刺激します。

※素肌に直接あててください。

## ◆ OFFの日のケア方法

足をクロスさせ、後ろになった側のヒップを持ち上げます。両手を交互に使って30回さり上げたら、逆側も同様に。



## 二の腕

Arms



## ◆ ONの日のケア方法

## セルケアモード

肘からわきの下に向かって、余分なラインを削ぎ落とすようなイメージでお肌の上にキャビスパ360を滑らせます。



## エクサモード

1日空けてからエクサモードでのケアを施します。筋肉が動く部分を探して二の腕をくっつように押しあてます。



## ◆ OFFの日のケア方法

腕を後ろにまっすぐ伸ばし、手のひらを天井に近づけるように力を入れます。そのまま3呼吸キープし、脇の下のリンパ節を刺激してめぐりを促します。



## 太もも

Thigh



## ◆ ONの日のケア方法

## セルケアモード

ヒザから足の付け根に向かって押しづします。太もも側面、全面、内側、裏側全体にしっかりとあてましょう。



## エクサモード

太もも裏中央あたりの筋肉がよく動くポイントを探して、刺激します。



## ◆ OFFの日のケア方法

内もも 足裏を合わせて座り、足先をもって前屈します。骨盤を立てたまま深く上体を倒し、10秒キープ。これを10回繰り返しましょう。



裏もも 右足を伸ばし、左足は膝で二つ折りするように座ります。ゆっくりへそを右足側に向けながら右足を両手でつかんで体を引き寄せ、10秒キープ。これを10回繰り返します。逆側も同様に。



## フェイスモード … 頬にはフェイスモードのみご使用ください。

髪の毛を巻き込まないように束ねるかヘアバンドなどで固定してください。  
アクセサリー類は外し、化粧をおとした清潔な状態のお肌にご使用ください。



## 顔

Face

お肌に軽く押しあてながら矢印の方向に動かします。



## 口もと

Mouth

鼻の横にあてて、口もとまわりの表情筋を刺激します。



身体の内側から

バーツを深くから磨き上げ、  
芯からの美しさへ。

## WAVY

製品型番:EP-15W

LIFT WAVE  
SYSTEM

ヤーマンの特許技術<sup>\*1</sup>によって、つまんで流すエステのようなハンドケアを再現した『トルネードローラー』と、効果的に筋肉を刺激する『LIFT WAVE EMS』を組み合わせ、4Dドレナージュ<sup>\*2</sup>を実現。

お肌に吸い付きもみ流す  
トルネードローラー

お肌に細かな刺激を与える  
ウェービング加工

深部の筋肉を刺激する  
LIFT WAVE EMS


Point!

身体の深層部へ  
直接アプローチ!  
気になる部位を  
集中ケアできる!




## 1 人の手のような動きで、 お肌の奥をもみ流す トルネードローラー

滑らせる角度や向きによって、全く異なった体感を与える独自トルネードローラーが、プロのハンドテクを再現。秘密は特許技術<sup>\*1</sup>により実現した、うねるような回転軌道。お肌をしっかりとつかんでもみ流す、吸い付くような深い体感でケアします。

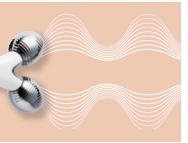トルネードローラーの  
イメージ

## 3 深部から筋肉を刺激する LIFT WAVE EMS

従来のEMSに比べて、広い周波数域を使用し、深部の筋肉も効果的に刺激する独自波形「LIFT WAVE EMS」を搭載。内側から凛と輝くような、芯からの美しさを目指します。

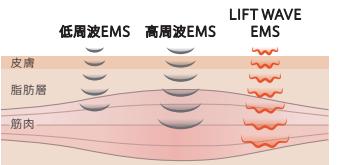

イメージ

## 2 お肌をしっかりと つかまる ウェービング加工

2つのローラー表面に施された波状のカッティングにより、お肌への高い密着性を実現。お肌にきめ細かい刺激をもたらします。




### USER'S VOICE

以前は手でマッサージをすることが多く、力の入れ具合が難しかったり、マッサージ後に疲れを感じることがありました。WAVYは転がすだけで程よくアプローチができる、またEMSによって筋肉が刺激される部分が気に入っています。マッサージがめんどくさいという気持ちがなくなりました。


## 選べる2つのモード

## ● ボディモード

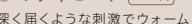

深く届くような刺激でウォームアップしたあとに筋肉を大きく動かしてトレーニング。

## ● フェイスモード

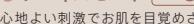

心地よい刺激でお肌を目覚めさせ、根本に働きかける表情筋トレーニングでケア。



● 使用上の注意 ● 使用頻度:ローラーのみ 1日3回まで / ローラー+EMS週に2~3回 ● 初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。● EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げないようご注意ください。● お顔にはフェイスモードのみご使用ください。● 化粧を落とした清潔な状態のお肌にご使用ください。

# WAVYの効果的な使い方

カラダの流れを意識して、効果的なセルフケアを体感しましょう。

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1からご使用ください。

また、EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げないようご注意ください。



## 効果的なお肌へのあて方

ローラーがお肌をつまむ強さは、本体をあてる角度と進行方向によって変わります。図をご参考に、お好みの角度でご使用ください。



**ボディモード** … 使用したい部位にゲルなどを塗るか、水で濡らしてからご使用ください。

基本的な使い方は動画でチェック!




## お腹

Waist

### 押し流す＆つまむで深部にアプローチ。

ローラーを軽く押しあてながら、肋骨から骨盤の上にかけてわき腹を滑らせるようにジグザグと転がします。下腹部は、おへそからわき腹にかけて、やさしくゆっくりとつまむように動かします。

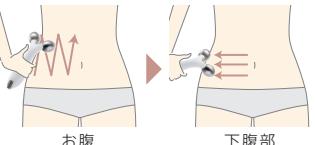

### EMSピンポイントケア

刺激を感じる場所でローラーを止めてより刺激を深部に届けるようにケアしましょう。



## お尻

Hip

### 持ち上げ引き上げる。

ローラーを軽く押しあてながら、ヒップの中央から外側に向けて引き上げるように転がしながら刺激していきます。

※素肌に直接あててください。




### EMS ピンポイントケア

## 二の腕 Arms

気になる部位をつまんでもみ流す。


肘からわきにかけて、ローラーを引きながらつまむように滑らせます。

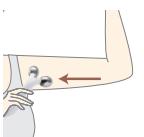

## バスト Bust

### 大胸筋ヘアプローチ。

バスト上部にローラーを軽く押しあてながら、わきの下に向かってやさしくゆっくりと転がします。

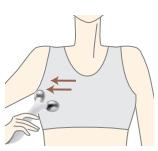

## フェイスモード … 頬にはフェイスモードのみご使用ください。

髪の毛を巻き込まないように束ねるかヘアバンドなどで固定してください。  
アクセサリー類は外し、化粧をおとした清潔な状態のお肌にご使用ください。



## フェイス ライン Face

### 優しくつまんで押し上げる。

下から上に持ち上げるようにローラーを軽く押しあて、やさしく転がします。耳の下で止めて使用すると効果的です。



## 頬 Cheek

### 周りの繊細な部位にも刺激。

お肌を持ち上げるようにローラーを押しあて、頬や口もとへ刺激を与えます。



## 鼻筋 Nose

### お顔を中心からケア。

1箇所にあてて、鼻の横の筋肉を刺激します。



# EMS シェイプゲル

EMS Shape Gel

植物由来の有用成分によるお肌の引き締めにフォーカスしたマッサージ用美容液。なめらかで引き締まった美しいシルエットへ。

## 1 肌引き締めサポート ヤーマン独自の バーニングスルーコンプレックス配合

8種の植物性肌引き締め成分を、特殊な微粒子化処理し配合。微粒子化することで、成分を安定的にお肌に届け、気になる部分に浸透<sup>※</sup>しやすくなっています。



## 2 肌引き締めサポート EMSサポート 成分配合

ボディケア製品との併せ使いに最適な独自のEMSサポート成分を配合しています。



## 3 保湿・美肌サポート たっぷり23種類の 保湿・美容成分を配合

セラミド、ペプチド、ビタミンA誘導体、ビタミンC誘導体など、美容液やナイトクリームにも使われる美容成分を配合。乾燥によるお肌のざらつきやキメの乱れを整え、うるおいが続く弾力肌へ。

- ✓ 3種のセラミド: 保湿によりお肌のバリア機能を助け、うるおいが逃げにくいお肌へ
- ✓ ペプチド: ハリ成分。お肌を保湿することでハリを与える
- ✓ アルブチン: お肌をなめらかに整える
- ✓ ハトムギ種子エキス: お肌にうるおいを与えキメを整える

## 4 保湿・美肌サポート お肌のことを考えた 7つの無添加処方

余分な成分を排除した7つの無添加で、お肌のことを考えた処方に。

